

CROSSTEX® | INDUSTRIAL
A CANTEL MEDICAL COMPANY

滅菌モニタリング製品／E0滅菌用

経験豊富な私共がタイムリーに的確な製品、
サービスを提供いたします。

私共は設計から完成まで皆様のご要望にお応えします。



株式会社センコム

EO

Crosstex | Industrial は Crosstex International, の I 部門で Cintel Medical Company (NYSE:CMN) です。私共は感染制御と滅菌保証製品の世界的な製造会社です。我々の製品は独創的で高品質で革新的な商品です。ほとんどの製品は米国で製造されております。我々の幅広い商品群はバイオリジカル インジケーター、ケミカル インジケーター、品質管理試験用菌液、滅菌バックそしてロール状の滅菌バックなどです。特注のインジケーター、防御マスク、効果の高い消毒液なども取り扱っております。

我々の製品は製薬、医療用具/機器製造、滅菌受託、研究所、ヘルスケア、歯科関連、食品/飲料そしてバイオ企業など広範囲に用いられております。我々は11の製造所/販売拠点を世界中に持っております。(米国に8ヶ所と米国以外に3ヶ所の拠点を持っております) 我々はこれらの拠点を通じ世界の感染制御又は滅菌保証市場へ効率的にタイムリーにサービスを提供しております。

Crosstexの感染制御製品と滅菌保証製品は米国FDA規制施設認証ISO 13485 2012 に基づいて製造されております。Crosstexは全ての製品に幅広く求められる証明書などを保管しております。必要な方は代理店(株)センコムへご連絡を。

販売、サービスと研究拠点	製造拠点
959 Illinois Avenue, Suite B Maumee, OH 43537 USA	6789 W. Henrietta Road Rush, NY 14543 USA
	31 Water Street Cuba, NY 14727 USA

輸入総発売元 株式会社センコム
110-0016 東京都台東区台東4-1-9
Tel (03)-3839-6321 Fax (03)-3839-6324
www.senkom.com / info@senkom.com

目 次

EOG滅菌用バイオリジカル インジケーター

- セルフコンティッド バイオリジカル インジケーター(担体接種)
 - 標準インジケーター
 - スポアービューインジケーター

インキュベーター

- 担体接種とバイオリジカル インジケーター 4
 - 標準スポアー ストリップ
 - ミニ スポアー ストリップ
 - 2種反能スポアー ストリップ
 - スポアー ディスク(円形)
 - 糸状スポアーとワイヤー状スポアー

- スポアーサスペンション(芽胞懸濁液) 5

ケミカル インジケーター

- ケミカル インジケーターストリップ 6
- インジケーターテープ 7
- ケミカル プロセス インジケーター 8

EOG滅菌用滅菌バック

- Sure-Check® 滅菌バック 9
- 滅菌バック保持具 9
- Duo-Check® セルフシール滅菌バッグ 10
- Duo-Check® ヒートシール滅菌バッグ 10
- Sani-Roll® ロール状の滅菌バッグ 10
- ヒートシーラー 11
- CSR 滅菌包装材 11

SporView®, DUAL™, と Steri-Coil™ これらの登録商標はSPSmedical Supply Corp. により登録されたものです。この会社はCrosstex社の完全子会社です。

Duo-Check®, Sure-Check® と Sani-Roll® これらの登録商標はSPSmedical Supply Corp. により登録されたものです。

Tyvek® はE. I. du Pont de Nemours and Company の登録商標です。

Trypticase® の商標登録はBecton, Dickinson and Company により所有されております。



セルフコンテインド バイオロジカル インジケータ- (SCBI)

Crosstex のE0滅菌用のSCBIは滅菌工程の結果を目視でいち早く確認することができます。このSCBIを使用することによりBI内の汚染の可能性が減少し、併せて潜在的に起こり得る滅菌後のBIの移動でのコンタミに関わる問題を最小化します。

- 培養時間は48時間に短縮されます。
- 培養液が緑から黄色に移行したら陽性です。
- BIに貼られているケミカル インジケータ-で滅菌の暴露は即座に判別できます。
- 標準ストリップBI使用時に行われる無菌下の培養操作が除かれ時間と作業が短縮されます。
- ユニークな梱包により、使用した(クラッシュ)SCBIは梱包の中で蓋の位置が変わっているので使用済と未使用の判別が容易にできます。
- ISO 11138-1と11138-2に準拠しております。

標準のSCBI

耐久性のあるポリカーボネートのフタ付バイアルと押しつぶすことのできるガラスアンプル、そして専用に作られたpH調整されたTSB培地とB. atrophaeus sporesが接種されたディスクで構成されます。



- 厳重な製造法により厳しい条件下の滅菌暴露でもSCBIの損傷の心配なく使用できます。
- フタを押し込むことによりアンプルは完全に押しつぶされ培養が促進されます。
- 大きさは13mmX61mmで滅菌器に直接設置できます。

スポアービュー-SCBI

サーモプラステックバイアルと緑のフタで押しつぶすことのできるガラスアンプルそして専用に作られたpH調整されたTSB培地とB. atrophaeus sporeが接種されたディスクからなります。



- SporView® SCBIはバイアルの横を手又は簡単な工具で押しつぶすことにより容易に培養が促進されます。
- ミニ サイズです8.4mmX45.5mm で滅菌の困難な場所に設置できます(コールドスポット)

標準のSCBI

Bacillus atrophaeus Cell Line 9372
使用有効期限 製造から最長24ヶ月

Crosstex コード	菌数	培養時間	入数
SCE-06	10 ⁶	48 時間	50/箱

SporView® SCBI

Bacillus atrophaeus Cell Line 9372
使用有効期限 製造から最長24ヶ月

Crosstex コード	菌数	培養時間	入数
SCA-100	10 ⁶	48 時間	100/箱

デジタル ドライ ブロック インキュベーター

Crosstexのデジタル ドライ ブロック インキュベーターは標準のSCBIとSporView SCBIの培養のために便利で確実な培養器を設計いたしました。

- 電気式加熱アルミニウムブロックは10本までのSCBIがセットできます。
- ブロック径は13mmです。
- 温度と培養時間はデジタルで表示されます。
- 調整可能温度は5°Cから70°Cで培養時間は0分から99時間59分です。



- 70°Cまでの培養温度には15分程で到達します。
- 透明カバーは温度の安定とSCBIの保護に役立ちます。

- 電源電圧は110-220V共通です。保証は出荷から12ヶ月です。

デジタル ドライ ブロック インキュベーター

Crosstex コード	電 圧	プラグ形状
INC-13A	110V	北米及び日本

標準ドライ ブロック インキュベーター

Crosstexの標準ドライ ブロック インキュベーターはブロック径11mm と13mmがあります。11mm径は(NDB-037) SporView SCBI用です。13mm径は(NDB-036) 標準のSCBI用です。併せて、13mm径は標準ストリップBI用の培養培地の培養にも用いられます。



- コンパクト設計で設置場所をとりません。
- SCBIは同時に15本まで培養できます。
- 11mm径ブロックはバイアル クラッシュ組み込みとなります。
- 保証は出荷から5年です。

標準ドライ ブロック インキュベーター

Crosstex コード	温 度	ブロック径	電圧	プラグの形状
NDB-037	37°C	11 mm	110V	北米及び日本
NDB-036	37°C	13 mm	110V	北米及び日本

担体接種のバイオ ロジカル インジケータ

Crosstex はエチレン オキシド (E0) 滅菌のモニタリング用の担体接種のバイオ ロジカル インジケータ-(BI) をフルラインで製造しております。私共の最も人気のある、これらの商品は最新式の装置で製造しております。このことは、各々のグラシン紙の中のバイオ ロジカル インジケータの菌数、純度そして品質が常に均一であることが保証されるのです。

- 1箱に100枚入りの使い易さ。
- 商品には分析証明書、菌数、純度、抵抗値D値、z値、Survival/Kill time(適合される場合のみ)の証明が添付されます。
- ISO 1113-1と11138-2に適合しております。

標準スポアー ストリップ

7mmX38mmのフィルターペーパーに芽胞菌が接種されたストリップです。取り扱い易いグラシン紙に入っております。

- ストリップをグラシン紙から取り出すには袋を引き裂くと容易に取り出せ培地に移すことができます。



ミニ スポアー ストリップ

2mmX10mmのフィルターペーパーに芽胞菌が接種されたミニストリップで色々なサイズがあります。これらは標準サイズのストリップが使用できないシリンジの中やチューブの中など狭い所に用います。

- Crosstex のミニスポーストリップには2つのサイズがあります。大きいサイズは30mmX50mm (STN-062) と小さいサイズは25mmX25mm (STN-062MG) です。



- 併せてストリップをひとまとめにしたバルク仕様もあります(グラシン紙に入らない) (STN-062B)

標準スポアー ストリップ BI

Bacillus atrophaeus Cell Line 9372
使用有効期限 製造から最長24ヶ月

Crosstex コード	菌数	入数
BG-104	10 ⁴	100/箱
BG-105	10 ⁵	100/箱
BG-106	10 ⁶	100/箱

※上記以外の菌数もご用意しております。
BG-103(菌数10³)、BG-107(菌数10⁷)、BG-108(菌数10⁸)

ミニスポーストリップ BIB


Bacillus atrophaeus Cell Line 9372
使用有効期限 製造から最長30ヶ月

Crosstex コード	包装	菌数	入数
STN-062	グラシン紙	10 ⁶	100/箱
STN-062B	バルク	10 ⁶	100/箱
STN-062MG	ミニ グラシン紙	10 ⁶	100/箱

ディスク BI

Crosstex のディスクBIには2種類のサイズがあります。直径3mmと6mmです。これらは滅菌の困難な場所(コールドスポット)に直接設置するために設計されております。

- ディスクBIは出し入れし易く又、バルクは取扱い易いように包装されております。
- Crosstex のディスクBIは器具の狭い所に用いるために設計されました。標準のストリップが入らないシリンジの円筒部、チューブの中、バイアルやフタの底などに設置します。

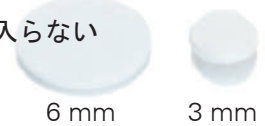

スポアードディスクBI


Bacillus atrophaeus Cell Line 9372

使用有効期限 製造から24ヶ月 (BG-106D) / 30ヶ月 (DN18-06)

Crosstex コード	直径	包装	菌数	入数
BG-106D	6 mm	バルク	10^6	100/箱
DN18-06	3 mm	バルク	10^6	100/箱

糸状スポアードBIとワイヤー状スポアードBI

- チューブや光束状の器具/装置など標準のBIが用いられない所に設置する理想的なBIです。
- Crosstexの製造工程は糸状/ワイヤー状の担体に均一な菌数が接種されるように設計されております。
- ワイヤー状スポアードは硬く、曲がり難い構造で器具への挿入や引き抜きが容易に行えます。
- 金属構造のワイヤー状スポアードは一切水分の吸収がありませんので水滴のある光束状内部での使用に最適です。

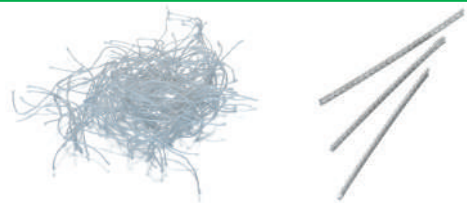

糸状スポアードBIとワイヤー状スポアードBI

Bacillus atrophaeus Cell Line 9372

使用有効期限 製造から最長24ヶ月 (糸状) / 12ヶ月 (ワイヤー状)

Crosstex コード	概要	包装	菌数	入数
THN-06	綿糸 25 mm x 0.1 mm	バルク	10^6	100/箱
SWN-06	金属編み状 40 mm x 1.5 mm	バルク	10^6	100/箱

スポアードサスペンションBI (芽胞懸濁液)

Crosstex が製造するスポアードサスペンションはエチレン オキシド ガス (E0) 滅菌工程の滅菌モニターに用いられます。サスペンションは純粋な懸濁液でD値も明記されております。併せて、菌数は0.1mL当たりの菌数が標準化され幅広い菌数レベルが用意されております。懸濁液は客先の製品に直接接種できます。とりわけ、ストリップ型のBIが用いられない製品の滅菌の確認に有用です。併せて、微生物に関わるテスト、洗浄の効果に関わる試験、バイオバーデン捕集率と細菌発育阻止/静真菌性 (BF) 試験にも用いられます。

- 10mlの使い易いバイアルの中に20%エタノールに懸濁された芽胞懸濁液BIです。
- 医薬グレードガラスバイアルにネジ込みフタとセプトラム付きです。
- サスペンションBIは冷蔵保存して下さい。(2°C~8°C)
- 各々のスポアードサスペンションには菌株番号、菌数、D値(濾紙に接種してD値を測定します)有効使用期限の証明書が添付されます。
- ISO 11138-1 に準拠しております。



スポアードサスペンションBI

Bacillus atrophaeus Cell Line 9372

使用有効期限 製造から最長18ヶ月

Crosstex コード	菌数/0.1mL
VBA-102	10^2
VBA-103	10^3
VBA-104	10^4
VBA-105	10^5
VBA-106	10^6
VBA-107	10^7
VBA-108	10^8
VBA-109	10^9

ケミカル インジケーター (CI) ストリップ

Crosstex のエチレン オキシド ガス滅菌モニター用のケミカル インジケーターは幅広いレンジで製造されております。このインジケーターは滅菌プロセスに暴露しますと明解に色変化します。インジケーターは2枚続きになっておりますが真ん中のミシン目で切り離し、より狭い場所に設値することもできます。

- クラス 1 又は クラス 4 のために設計されたケミカル インジケーターはE0滅菌54°Cで20分暴露、60%湿度 (RH) 600mg/L ガス濃度に対応するインジケーターです。
- 100% E0 ガスとE0/HCFC 混合ガスにも使用できます。
- 室温保存して下さい。(15°C~30°C)
- 各商品には品質保証書が添付されます。

2種類がー対のモニターストリップ

- E0ガス滅菌暴露でクリーム色からオレンジ色に、蒸気滅菌暴露でクリーム色からダークブラウン色に変わります。
- E0ガス滅菌と蒸気滅菌両方に使用できます。そのために、単独のストリップの使用に比べ在庫数やコストダウンの効果がはかれます。
- ラミネート状特注品もあります。(DMS-250-L)
- ISO 11140-1 クラス 1に準拠しております。

未暴露 (E0)



暴露済 (E0)



E0 ガス インジケーターストリップ クラス 1

- E0 滅菌ガスに暴露しますとクリーム色からオレンジ色に変わります。
- ISO 11140-1 クラス 1 に準拠しております。

未暴露



E0 ガス滅菌モニターストリップ クラス 1

- E0滅菌ガスに暴露しますとクリーム色からオレンジ色に変化します。
- ISO 11140-1 クラス 1 に準拠しております。



E0 ガス インジケーター ストリップ クラス 4

- E0ガスに暴露しますと青色からブラウン/ゴールドに色変化します。
- ISO 11140-1 クラス 4 に準拠しております。



ケミカル インジケーターストリップ

Crosstex コード	概要	クラス	大きさ	入数
DMS-250	DUAL™ モニターストリップ	クラス1	203mm x 16mm	250/箱
DMS-250-L	DUAL™ モニターストリップ	クラス1	203mm x 16mm	250/箱
GIS-250	EO ガスインジケーターストリップ	クラス1	101mm x 19mm	250/箱
GSM-100	EO ガス滅菌モニターストリップ	クラス1	60mm x 19mm	250/箱
GIL-250	EO ガスインジケーターストリップ	クラス4	203mm x 16mm	250/箱

インジケータータープ

インジケータータープは滅菌工程を通過しますとテープの色変化が生じ、即座に滅菌暴露の確認ができます。テープは長さ54m、幅25mm 又は19mmです。ディスペンサーには2ロールまでセットできます。ディスペンサーは自重で作業台の上などで安定します。

- 滅菌工程暴露で赤色からグリーンに色変化します。
- テープ面に筆記できます。
- ISO 11140-1 クラス 1に準拠します。

インジケータータープ

Crosstex コード	概要	入数
GT-036	25mm E0ガス インジケータータープ	18巻/箱
GT-048	19mm E0ガス インジケータータープ	24巻/箱
TD-001	テープ ディスペンサー	1台



販売資料にプリントされたインジケータの色は実際の使用時と異なる場合があるかも知れません。



ケミカル プロセス インジケータ- (CPI)

Crosstex のエチレン オキシド (E0) ガス滅菌用ケミカル プロセス インジケータ-はCrosstexの環境にやさしいインクから作られております。これらのインジケータ-はISO 11140-1の医療用具滅菌-ケミカル インジケータ-パート 1:一般要求事項、クラス 1 プロセス インジケータ-の要求事項に合致しております。我々のこれらのインジケータ-は迅速に安定して目視でE0滅菌工程の確認が行えます。

- 色移行することなく紫から緑に変化いたします。
- 室温で保存できます。(15℃~30℃)
- 糊接着力は半永久的です。
- 各商品には製造品質保証書が添付されます。

ケミカル プロセス インジケータ- (CPI)

使用有効期限 製造から24ヶ月

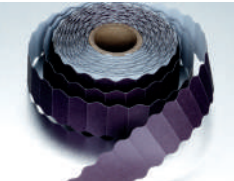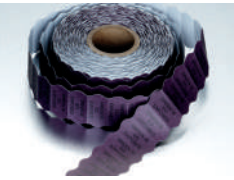Crosstex コード	概要	枚数/ロール	未暴露	暴露後
	CPI-E01 無地 円形12.7mm 12.7 mm	5.000		
	CPI-E02 手貼りラベル 25mmx12mm	1,500		
	CPI-E03 印字 円形12.7mm 緑はE0照射後	5.000		
	SP-E16 手貼りラベル 25mmx12mm 緑はE0照射後	1.500		

使用有効期限 製造から36ヶ月

Crosstex コード	概要	枚数/ロール	未暴露	暴露後
	SGL-1000 DUAL™ 円形19mm 19 mm	1.000		

Sure-Check® 滅菌バック

Sure-Check® 滅菌バックの内部/外部のケミカル インジケーターは蒸気滅菌とE0ガス滅菌のみに反応します。蒸気暴露はピンクから薄茶色に変化し、E0ガスはピンクからこげ茶色に変化します。バックの素材はメディカル グレード ペーパーで造られ、併せて、セルフ シールの粘着部はしっかり保持され、約3年間滅菌性は保持されます。

- ケミカル プロセス インジケーターは色移行なく色変化します。
- 再利用器具滅菌用の使い捨て滅菌バックです。
- 湿度に強く処理されたメディカル グレード ペーパーは医療用滅菌バックの規格を上回ります。



Sure-Check® 滅菌バック

Crosstex コード	大きさ	滅菌法	枚数
SCXX2	(6X10cm)	Steam/E0	200/bx, 20/cs
SCX2	(7X23cm)	Steam/E0	200/bx, 20/cs
SCXS2	(9X13cm)	Steam/E0	200/bx, 10/cs
SCS2	(9X23cm)	Steam/E0	200/bx, 20/cs
SCS25	(9X23cm)	Steam/E0	500/bx, 10/cs
SCL3222	(9X56cm)	Steam/E0	100/bx, 5/cs
SCW2	(13X17cm)	Steam/E0	200/bx, 10/cs
SCM2	(13X25cm)	Steam/E0	200/bx, 10/cs
SCL5152	(13X38cm)	Steam/E0	200/bx, 10/cs
SCL2	(19X33cm)	Steam/E0	200/bx, 5/cs
SCL8162	(20X41cm)	Steam/E0	200/bx, 5/cs
SCL10152	(25X38cm)	Steam/E0	100/bx, 5/cs
SCL10172	(27X43cm)	Steam/E0	100/bx, 5/cs
SCL12152	(30X38cm)	Steam/E0	100/bx, 5/cs
SCL12182	(30X46cm)	Steam/E0	100/bx, 5/cs



Steri-Coil™ 滅菌バックホルダー

Crosstex コード	大きさ	入数
SCD-001	8.9 X 8.9 X 5.1cm	1
SCD-012	6.3 X 1.5cm	1



Duo-Check® 滅菌バック

Duo-Check® 滅菌バックの内部/外部にケミカル インジケーターを備えたこの滅菌バックは中の滅菌物の滅菌性を約3年間保持します。インジケーターは蒸気とE0ガスのみに反応、変色いたします。

- ・ヒートシール/セルフシール指定選択可
- ・再利用器具滅菌用の使い捨て滅菌バックです。
- ・メディカル グレード ペーパー素材と幅広いV字形のシール部の滅菌バックは滅菌性の向上をもたらします。
- ・ピンクの矢印は蒸気滅菌で薄茶色に変わります。E0ガスに暴露しますとこげ茶色に変わります。
- ・ISO 11140と11607の標準に合致しております。



Duo-Check® セルフシール滅菌バック

Crosstex コード	大きさ	滅菌法	枚数
SCZ	(5 X 20cm)	Steam/E0	200/bx, 20/cs
SCXX	(6 X 10cm)	Steam/E0	200/bx, 20/cs
SCX	(7 X 23cm)	Steam/E0	200/bx, 20/cs
SCQ	(8 X 23cm)	Steam/E0	200/bx, 20/cs
SCXS	(9 X 13cm)	Steam/E0	200/bx, 10/cs
SCS	(9 X 23cm)	Steam/E0	200/bx, 20/cs
SCS5	(9 X 23cm)	Steam/E0	500/bx, 10/cs
SCL322	(9 X 56cm)	Steam/E0	100/bx, 5/cs
SCB1X	(11 X 28cm)	Steam/E0	200/bx, 10/cs
SCM	(13 X 25cm)	Steam/E0	200/bx, 10/cs
SCL515	(13 X 38cm)	Steam/E0	200/bx, 10/cs
SCL	(19 X 33cm)	Steam/E0	200/bx, 5/cs
SCL816	(20 X 41cm)	Steam/E0	200/bx, 5/cs
SCL1015	(25 X 38cm)	Steam/E0	100/bx, 5/cs
SCL1215	(30 X 38cm)	Steam/E0	100/bx, 5/cs
SCL1218	(30 X 46cm)	Steam/E0	100/bx, 5/cs

Duo-Check® ヒートシール滅菌バック

Crosstex コード	大きさ	滅菌法	枚数
SC310HS	(8 X 25cm)	Steam/E0	200/bx, 10/cs
SC48HS	(10 X 20cm)	Steam/E0	200/bx, 10/cs
SC411HS	(12 X 28cm)	Steam/E0	200/bx, 10/cs
SC610HS	(15 X 25cm)	Steam/E0	200/bx, 10/cs
SC622HS	(15 X 56cm)	Steam/E0	200/bx, 5/cs
SC713HS	(19 X 33cm)	Steam/E0	200/bx, 5/cs
SC1015HS	(25 X 38cm)	Steam/E0	200/bx, 5/cs

Sani-Roll® ロール状 滅菌バック (紙/プラスチック)

- ・便利です！長さや幅のある器具のための滅菌バックです。
- ・メディカル グレード ペーパーで作られております。
- ・青みがかった透明のフィルムは内容物の確認が容易にできます。
- ・ケミカルインジケーターが付いております。蒸気とE0ガスで変色します。



Sani-Roll® ロール状滅菌バック

Crosstex コード	大きさ	滅菌法	枚数
SCT2	(5cm X 30m)	Steam/E0	16巻/cs
SCT3	(8cm X 30m)	Steam/E0	12巻/cs
SCT4	(10cm X 30m)	Steam/E0	12巻/cs
SCT6	(15cm X 30m)	Steam/E0	12巻/cs
SCT2200	(5cm X 200m)	Steam/E0	8巻/cs
SCT3200	(8cm X 200m)	Steam/E0	4巻/cs
SCT4200	(10cm X 200m)	Steam/E0	4巻/cs
SCT6200	(15cm X 200m)	Steam/E0	2巻/cs
SCT8200	(20cm X 200m)	Steam/E0	2巻/cs
SCT12200	(30cm X 200m)	Steam/E0	1巻

ヒートシーラー

コンパクトで操作が容易です。各シーラには取扱い説明書が添付されております。シーラは46cmと61cmの2器種があります。装置は使用前に少しのウォームアップ時間が必要です。

- 1.3cmのシールは約2秒でシールできます。
- 仮に3mm以上厚いシーリングの場合、作業員の危険回避のため操作が停止します。

- シール温度は、シール素材(紙/ポリエチレン/Tyvek)により適切に設定できます。



ヒートシーラー

Crosstex コード	大きさ	入数
MHS-002	46cm	1
MHS-003	61cm	1

CSR 滅菌包装材


木材パルプから作られた環境にやさしいセルロース素材から作られております。これらは石油製品ではありませんのでオイル分は含まれておらず、皮膚への過敏な影響はありません。

- 高いBFE (Bacterial Filtration Efficiency) のデーターは入手可能です。高い浸透性は価格効果をもたらします。
- 細菌の侵入を防ぎ空気媒介や水媒介の汚染を防止します。
- 優れた排水性—水、アルコール、ヨウ素など。
- まれにみる引っ張り強度—(濡れた状態や乾燥状態でも)
- E0ガス滅菌と蒸気滅菌に用いて下さい。
- 手ざわりだけでも小さなピンホールや破れなどが確認できます。
- FFA(Flammable Fabrics Act)の要求事項に合致しております。



CSR 滅菌包装材

Crosstex コード	大きさ	滅菌法	入数
SW12	(30 x 30cm)	Steam/E0	100/bx, 10/cs
SW15	(38 x 38cm)	Steam/E0	100/bx, 5/cs
SW18	(46 x 46cm)	Steam/E0	100/bx, 5/cs
SW20	(51 x 51cm)	Steam/E0	100/bx, 5/cs
SW24	(61 x 61cm)	Steam/E0	100/bx, 5/cs
SW30	(76 x 76cm)	Steam/E0	100/bx, 1/cs
SW36	(91 x 91cm)	Steam/E0	100/bx, 1/cs
SW40	(102 x 102cm)	Steam/E0	100/bx, 1/cs
SW48	(122 x 122cm)	Steam/E0	100/bx, 1/cs
SW54	(137 x 137cm)	Steam/E0	100/bx, 1/cs

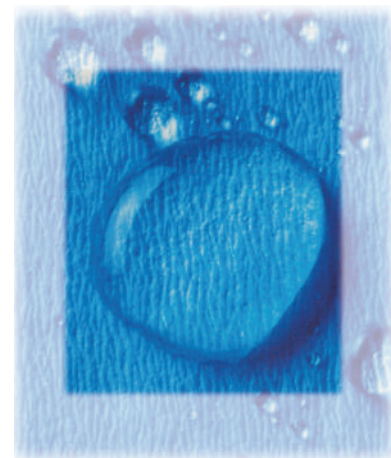

製品カタログ一覧

CROSSTEX | INDUSTRIAL

Consistent.
Reliable.
Innovative.
Your most trusted partner for sterilization products and services.



Monitoring Products for Steam Sterilization

STEAM

CROSSTEX | INDUSTRIAL

Timely.
Accurate.
Experienced.
We're with you from start to finish.



Monitoring Products for Ethylene Oxide

EO

CROSSTEX | INDUSTRIAL

Trusted.
Tailored.
Precise.
We can help you ensure the safety of your product.



Monitoring Products for Gamma & E-Beam Sterilization

IRRAD

CROSSTEX | INDUSTRIAL

Innovative.
Smart.
Trusted.
We're your partner for sterilization products.



Monitoring Products for Vaporized Hydrogen Peroxide

VH202

CROSSTEX | INDUSTRIAL

Secure.
Tested.
Certified.
We solve problems with confidence and creativity.



Monitoring Products for Dry Heat

DRY

Steam-Formaldehyde

FORM

Chlorine Dioxide

CLO2

CROSSTEX | INDUSTRIAL

Precise.
User-friendly.
Flexible.
We're here to verify your product performance.



Quality Control Test Suspensions - Growth Promotion

CROSSTEX | INDUSTRIAL

THE RIGHT MASK FOR THE RIGHT TASK!



MaskEncounter™
The Crosstex guide to face mask selection and use.
Appropriate for all tasks in the 1000+ scenarios.

CROSSTEX
A CANTREL MEDICAL COMPANY

SEN 854-1988 • info@senkom.com

輸入総発売元
株式会社センコム
〒110-0016 東京都台東区台東4-1-9
TEL.03-3839-6321 FAX.03-3839-6324
Email:info@senkom.com / www.senkom.com
SK01272017 Ver.01(Rev.02/06192018)

CROSSTEX | INDUSTRIAL
A CANTREL MEDICAL COMPANY

品質管理用／培地性能試験用菌液